

Ficha técnica

Limpiador de lengua

Descripción:

El dentista recomienda la limpieza oral no solo requiere cepillarse, sino que también limpia la lengua, elimina las células muertas de la lengua y mejora el sabor. Nuestro limpiador de lengua tiene un mango antideslizante de doble cara que es ergonómico y experimentado y no se desliza fácilmente de sus manos. Diseñado para ayudar a eliminar la placa, los restos de comida y las bacterias de la superficie de la lengua para ayudar a prevenir el mal aliento.

Presentación:

Descripción	Color	Color EAN 13	Contenido
Limpiador de lengua	Blanco	8435454001556	1 ud/estuche; 144 estuches/Ctn

Instrucciones de uso:

- Colocar el limpiador lingual en la parte posterior de la lengua y tirar suavemente del mango hacia delante, deslizándolo por la superficie de la lengua sobre el arco.
- Enjuagar la boca y el limpiador lingual, repetir al menos una vez al día.

Almacenamiento:

- Almacenar en lugares secos. No exponer a la luz solar directa, provocando altas temperaturas.



*Quality Products for a healthy life!

KL MED SANITECH SOLUTIONS S.L

CIF: B87292751

Av. De las Morcillas 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300


+34-913 892 301

Información Logística


Limpiador de lengua



Expositor:
Presentación:
1 ud/estuche

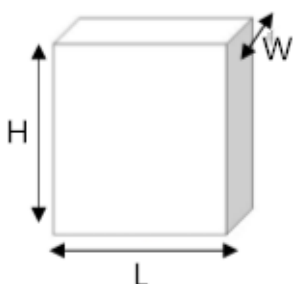

Cartón:
Presentación: 144 expositores /Ctn
Tamaño de cartón: 45cm(L) x 26.5cm(W) x 26cm(H)

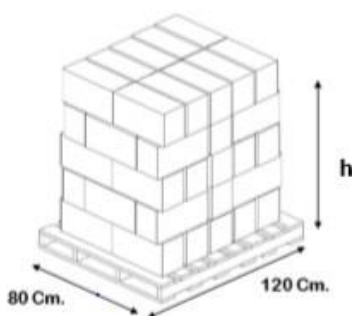

Palé :
Palé para almacenar: Presentación: 42 Ctns/palé
Tamaño de palé: 120cm x 80cm x 197cm(h)
Palé para enviar: Presentación: 42Ctns/palé
Tamaño de palé: 120cm x 80cm x 197cm(h)



*Quality Products for a healthy life!

KL MED SANITECH SOLUTIONS S.L

CIF: B87292751

Av. De las Morcillas 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301