

Ficha técnica

Servilletas Soft

Descripción:

Las servilletas soft de 2 capas están fabricadas con una capa de celulosa de alta absorción acoplada a una de polietileno, de esta forma consiguen una mayor impermeabilidad y protección contra líquidos, residuos y salpicaduras con la ropa del paciente. Las servilletas es un accesorio para proteger al paciente durante procedimiento dental.

Características:

- Servilleta de 2 capas
- Celulosa + Polietileno
- Gran absorción, resistencia e impermeabilidad
- Tamaño 33x45cm
- Producto de un solo uso
- Disponible en 9 colores

Presentación:

Descripción	Color	Medida	EAN 13	Contenido
Servilleta soft 2 capas	Naranja	33x45cm	8435454003963	125 servilletas/bolsa, 4 bolsas/Ctn
Servilleta soft 2 capas	Amarilla	33x45cm	8435454003970	125 servilletas/bolsa, 4 bolsas/Ctn
Servilleta soft 2 capas	Lima	33x45cm	8435454004069	125 servilletas/bolsa, 4 bolsas/Ctn
Servilleta soft 2 capas	Azul oscuro	33x45cm	8435454004076	125 servilletas/bolsa, 4 bolsas/Ctn
Servilleta soft 2 capas	Negra	33x45cm	8435454004267	125 servilletas/bolsa, 4 bolsas/Ctn
Servilleta soft 2 capas	Rosa	33x45cm	8435454004274	125 servilletas/bolsa, 4 bolsas/Ctn
Servilleta soft 2 capas	Violeta	33x45cm	8435454004281	125 servilletas/bolsa, 4 bolsas/Ctn
Servilleta soft 2 capas	Celeste	33x45cm	8435454004298	125 servilletas/bolsa, 4 bolsas/Ctn
Servilleta soft 2 capas	Verde	33x45cm	8435454004304	125 servilletas/bolsa, 4 bolsas/Ctn

Normativa:

- Reglamento (UE) 2017/745

Almacenamiento:

- Almacenar en lugares secos. No exponer a la luz solar directa, provocando altas temperaturas.



SUNMED TECHNOLOGY SL
CIF: B01654029
AV. DE LAS MORCILLERAS 33
28343 VALDEMORO, MADRID
Tel +34-913 892 300
+34-913 892 301

Instrucciones de uso

Servilletas Soft

Preparación:

1. Higiene personal: Antes de manipular la servilleta, lave y desinfecte sus manos.
2. Verificación del producto: Inspeccione la servilleta para asegurar de que esté limpia, seca y en buen estado. Deseche cualquier unidad que presente daños o signos de contaminación.

Colocación:

1. Colocación del paciente: haga que el paciente se siente cómodamente en la silla dental.
2. Posición del babero: Despliegue la servilleta y colóquela frente al pecho del paciente, con el lado absorbente hacia fuera.
3. Fijación:
 - Si utiliza clips o cadenas: Enganche los extremos de la servilleta a los clips y colóquelos alrededor del cuello del paciente de manera ajustada, pero sin causar incomodidad.
 - Si usa adhesivos, pegue la servilleta sobre la ropa o la bata del paciente.

Durante el procedimiento:

1. Asegúrese de que la servilleta permanezca en su lugar.
2. Si es necesario, reacomode o reemplace la servilleta durante procedimientos prolongados o si esta se moja en exceso.

Retiro:

1. Con cuidado, retire los clips o despegue la servilleta, evitando que los residuos entren en contacto con el paciente.
2. Deseche la servilleta en un contenedor adecuado para desechos clínicos.

Advertencias:

1. Si el paciente tiene alergias conocidas a materiales específicos, asegúrese de que la servilleta esté libre de esos componentes.
2. Este producto no sustituye a los equipos de protección personal para el odontólogo o su asistente.
3. Úselo exclusivamente en el entorno dental para el propósito indicado.



SUNMED *Quality Products for a healthy life!

SUNMED TECHNOLOGY SL
CIF: B01654029
AV. DE LAS MORCILLERAS 33
28343 VALDEMORO, MADRID
Tel +34-913 892 300
+34-913 892 301

EAN 13

8435454003963

8435454003970

8435454004069

8435454004076

8435454004267

8435454004274

8435454004281


8435454004298

8435454004304



Bolsa:

Presentación: 125 servilletas/bolsa

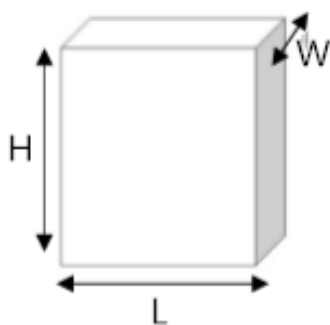

Cartón:

8435454004298, 8435454004069

Presentación: 500 servilletas/Ctn;

Tamaño de cartón: 36.5cm x 14cm x 29.5cm

Los demás:

Presentación: 500 servilletas/Ctn;

Tamaño de cartón: 34.5cm x 24.5cm x 19cm

Palé:

8435454004298, 8435454004069

Palé para almacenar:

Presentación: 104 Ctns/palé;

Tamaño de palé: 120cmx80cmx197cm(h)

Palé para enviar:

Presentación: 112 Ctns/palé;

Tamaño de palé: 120cmx80cmx211cm(h)

Los demás:

Palé para almacenar:


Presentación: 90 Ctns/palé;

Tamaño de palé: 120cmx80cmx186cm(h)

Palé para enviar:

Presentación: 100 Ctns/palé;

Tamaño de palé: 120cmx80cmx205cm(h)

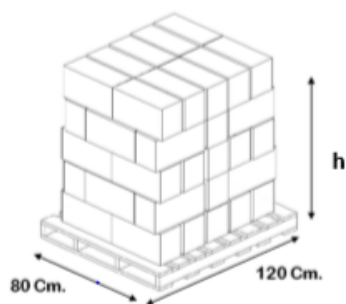

SUNMED *Quality Products for a healthy life!

SUNMED TECHNOLOGY SL

CIF: B01654029

AV. DE LAS MORCILLERAS 33

28343 VALDEMORO, MADRID

Tel +34-913 892 300

+34-913 892 301